




DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

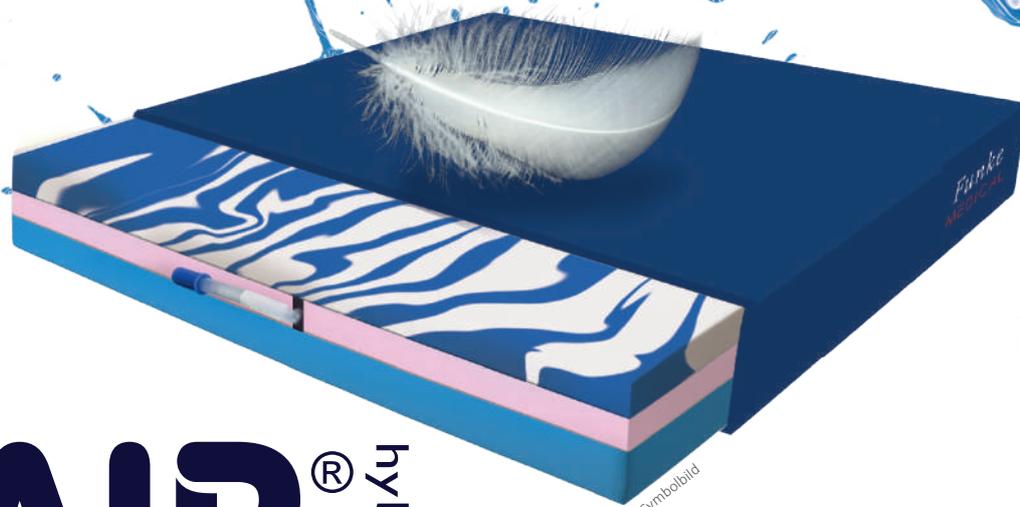

Symbolebild

XAIR® hybrid

- LUFTZELLEN-SITZKISSEN -
Für aktive Rollstuhlfahrer!



HILFSMITTELNUMMER
11.39.03.9001



Annabel Brewer
Annabel Brewer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball

Überreicht durch:

Official sponsor




- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

XAIR[®] hybrid

Dekubitustherapie-Luftzellen-Sitzkissen für aktive Rollstuhlfahrer!

3 JAHRE GARANTIE *

- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Einsetzbar bis Grad 4 (nach Prof. Seiler/EPUAP)
- Sehr hohes Risiko (Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)
- HMV-Nr. 11.39.03.9001

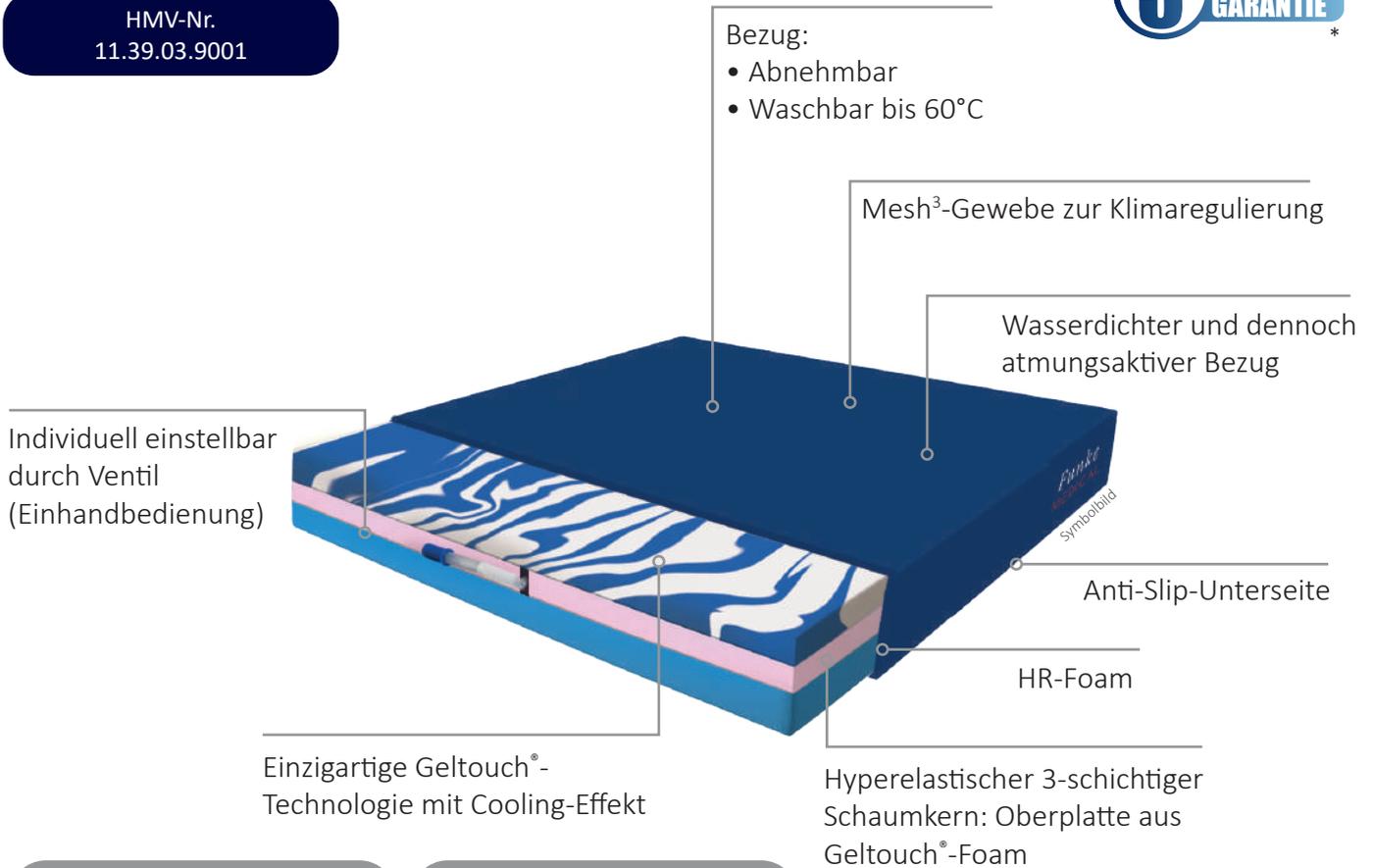

Größe	Art. - Nr.	Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe		Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	XAIR3840	45 x 44 x 8	XAIR4544
40 x 40 x 8	XAIR4040	45 x 46 x 8	XAIR4546
40 x 42 x 8	XAIR4042	46 x 51 x 8	XAIR4651
41 x 46 x 8	XAIR4146	48 x 42 x 8	XAIR4842
42 x 40 x 8	XAIR4240	48 x 44 x 8	XAIR4844
42 x 42 x 8	XAIR4242	48 x 46 x 8	XAIR4846
42 x 44 x 8	XAIR4244	50 x 42 x 8	XAIR5042
42 x 46 x 8	XAIR4246	51 x 44 x 8	XAIR5144
42 x 52 x 8	XAIR4252	51 x 46 x 8	XAIR5146
45 x 42 x 8	XAIR4542	52 x 52 x 8	XAIR5252

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



XAIR[®] hybrid-Film

Offener poriger atmungsaktiver Geltouch [®] -Foam + HR-Foam + Visco-Foam	Autoklavierbar	Bezugsmaterial viren- und bakterien-dicht gem. ASTM 1670 + 1671	Wasserdicht dennoch atmungsaktiv	Optimierte Druckentlastung	Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte	CE-Kennzeichnung MDR 2017/745	Wartungsfrei	Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)	Patientengewicht: 0 bis 200 kg	Sehr leicht

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!



JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



- LUFTZELLEN-SITZKISSEN-
Für aktive Rollstuhlfahrer!




Griff für den
einfachen Transport

Weiche Schutzabdeckung
mit Klettverschluss




1

Schutzabdeckung nach
oben klappen.

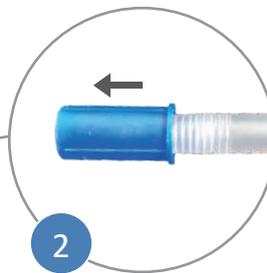

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 30 Sekunden warten, bis sich
die Luftkissen selbstständig
aufgeblasen haben.
(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

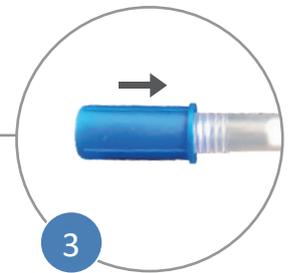

3

Ventil durch
Drücken schließen.




4

Kissen auf die Sitzfläche des
Rollstuhles oder Sitzes legen.

(Der Haltegriff muss nach vorne und die darauf
angebrachten Pfeile müssen nach oben zeigen.)

Auf das Kissen setzen.

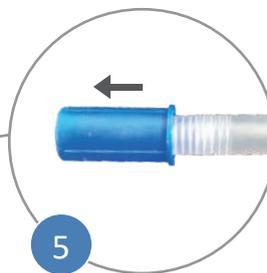


5

Vorsichtig das Ventil
wieder öffnen bis der ideale
Sitzkomfort erreicht ist.



6

Ventil wieder schließen.
Danach die Schutzabdeckung
wieder nach unten klappen.

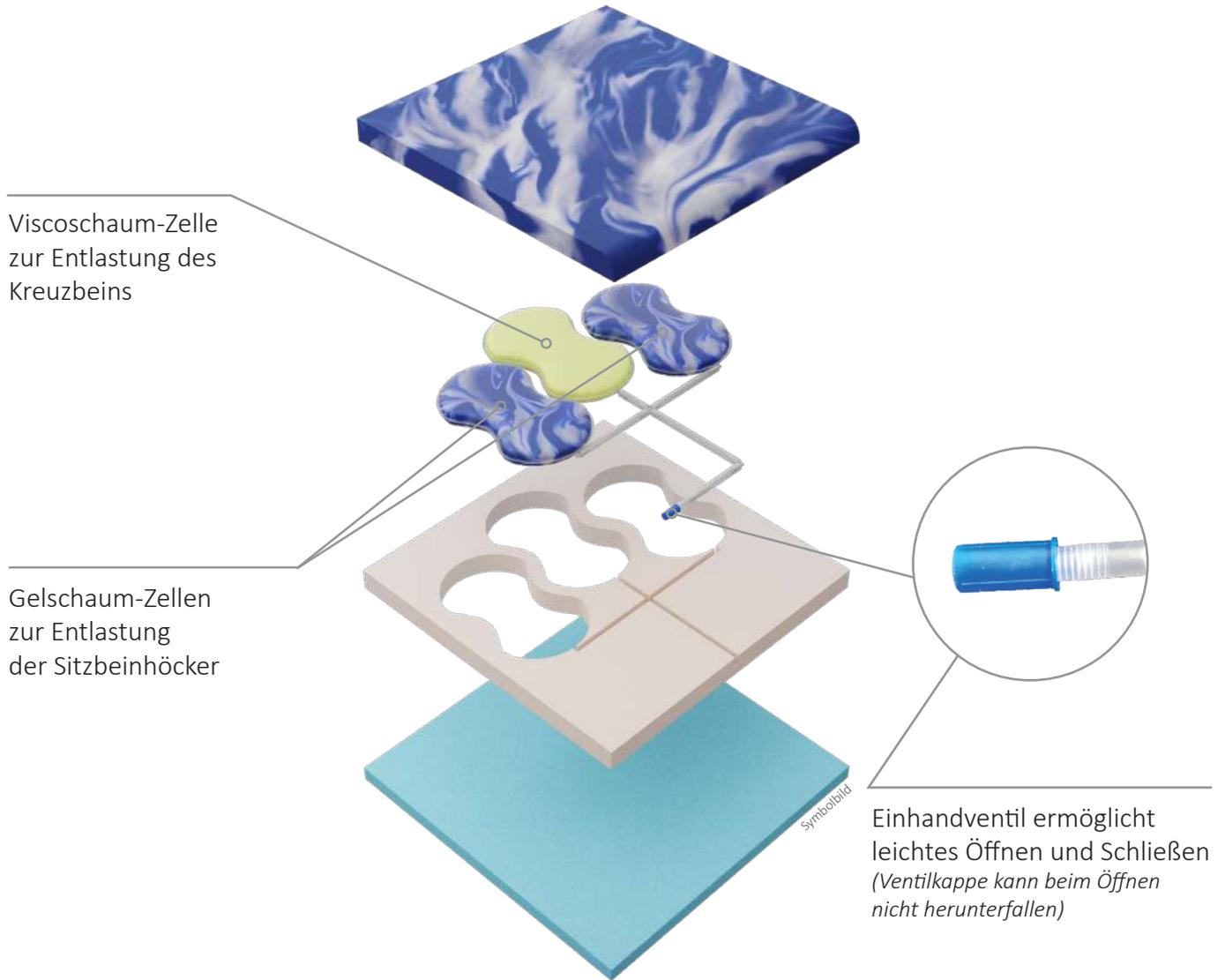

3-Kammer-Sitzkissen sorgt für eine optimale Druckentlastung



Individuell einstellbar für idealen Sitzkomfort



Keine Pumpe oder andere Werkzeuge notwendig



Schnelle und einfache Anpassung an die äußeren Druckverhältnisse



Kein Ausfallrisiko durch selbstaufblasende FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGIE



Sehr leicht – 70 % weniger Gewicht als herkömmliche Luftzellen-Sitzkissen